



TOP TECH

PRESIDON-MV 系列



MV01A

MV02A



*Perfect Surface.
Always*

MV01A/MV02A

智慧觸控真空鑲埋機型-MV01A/MV02A，配備高達99次之最新全自動真空循環吸放科技及直覺式人機觸控介面，可大幅縮短作業之複雜性與操作時間，及確保多孔性材料之邊緣包覆性與製樣成功率。




TOP TECH

機台特色

全自動智慧機械 及直覺式人機操作介面

4.3" 彩色觸控面板及直覺式人機介面設計，具真空作業階段圖形化顯示，8組記憶模組可供設定、多國語言、單位自動換算、與高達99次循環真空壓力及時間設計，實現全自動智慧機械功能。

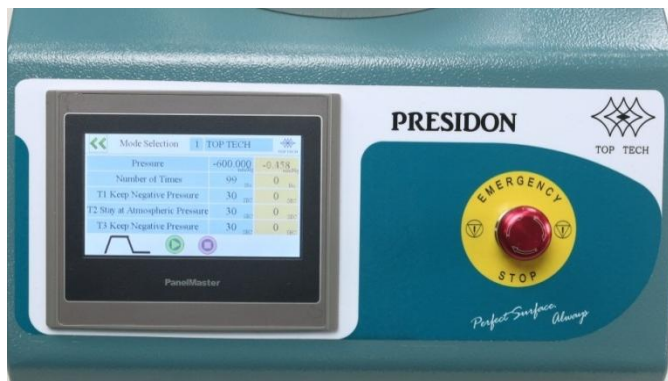

可調式-鑲埋液吸入設計
搭配手動啟動之真空吸附功能，與360度搖桿裝置，使用者可自由調整鑲埋液之灌注速度與位置，確保真空室使用率最大化。






Model: MV02A

超大腔體與多視窗設計 (MV01A)

上下結合式金屬腔體設計，
搭配多個觀察視窗，在兼顧
穩固與作業效率的同時，
也滿足清潔與使用的方便性。

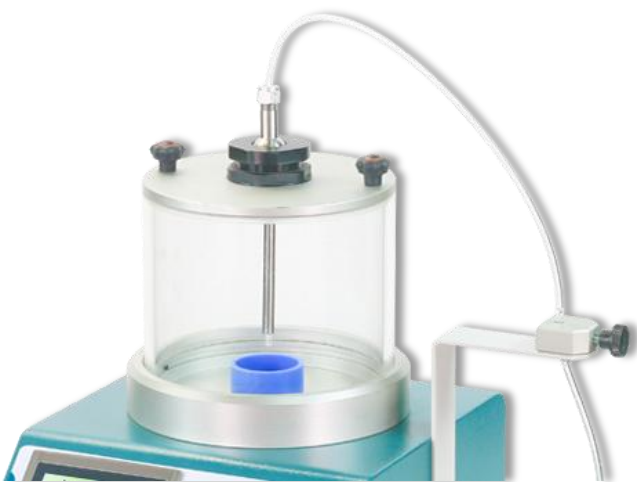

高透明腔體設計(MV02A)

滿足使用者全視角觀察，與
精準注入鑲埋液體之需求，
節省耗材成本與提升作業效
率。



TOP TECH

耗材



料號	快速環氧樹脂組-固化時發熱(室溫下45分鐘固化) 適搭耐熱產品如:鐵、不鏽鋼、鋁合金等金屬
S0303A01	環氧樹脂950ml+硬化劑20ml
S0303A-1	環氧樹脂950ml+硬化劑20ml+攪拌包



料號	高流速環氧樹脂組-固化時不發熱(室溫下約24小時固化) 適搭不耐熱材 如: IC、塑膠等
S0303A02	環氧樹脂950ml+硬化劑350ml
S0303A-2	環氧樹脂950ml+硬化劑350ml+攪拌包

料號	矽膠模具(一般版) 底部是透明亮面，周圍是霧面	包裝(個/包)
S10A01-1	適用於直徑25mm，高度25mm(容量約12ml)	10
S10A02-1	適用於直徑32mm，高度25mm(容量約20ml)	10
S10A03-1	適用於直徑40mm，高度25mm(容量約30ml)	10
S10A04-1	適用於直徑50mm，高度25mm(容量約45ml)	10



料號	矽膠模具(高透亮版) 底部和周圍都是透明亮面	包裝(個/包)
S10A011-1	適用於直徑25mm，高度25mm(容量約12ml)	10
S10A021-1	適用於直徑32mm，高度25mm(容量約20ml)	10
S10A031-1	適用於直徑40mm，高度25mm(容量約30ml)	10
S10A041-1	適用於直徑50mm，高度25mm(容量約45ml)	10

料號	透明壓克力模具(無底)	包裝(個/包)
S16025-1	直徑25mm，高度20mm(容量約7ml)	10
S16030-1	直徑30mm，高度20mm(容量約10ml)	10
S16040-1	直徑40mm，高度20mm(容量約20ml)	10
S16050-1	直徑50mm，高度20mm(容量約33ml)	10





料號	透明壓克力模具(有底)	包裝(個/包)
S16025A02-1	直徑25.4mm，高度23mm (容量約11ml)	50
S16032A02-1	直徑31.75mm，高度23mm (容量約18ml)	50



料號	樣品夾具	包裝(個/盒)
S17003	不銹鋼圓形樣品夾具 適用於各種金屬樣品夾持 外觀尺寸 \varnothing 10 x 7 H (mm)	100



S17004	塑膠圓型樣品夾具 適用於各式非金屬樣品夾持 外觀尺寸 \varnothing 7 x 6 H (mm)	100
--------	---	-----



S0805A-1	正方形PCB專用成型模具 外觀尺寸20 L x 20 W x 20 H (mm) 內部空間16 L x 2 or 3 W (mm)	200
----------	---	-----



S0806A-1	外圓內方PCB專用方型模具 外觀尺寸30 L x 30 W x 20 H (mm) 內部空間16 L x 2 or 3 W (mm)	200
----------	--	-----



S0807A-1	長方形PCB專用成型模具 外觀尺寸25 L x 10 W x 20 H (mm) 內部空間20 L x 2 W (mm)	200
----------	--	-----



S17006	塑膠三腳樣品夾具(黑色) 適用各種非金屬樣品夾持	100
--------	-----------------------------	-----



S17007	塑膠三腳樣品夾具(透明) 適用各種非金屬樣品夾持	100
--------	-----------------------------	-----



TOP TECH

金相前處理專用工作桌



型號

TF01

TF02

尺寸

1000*800*700 mm


1000*1200*700 mm

樣品照





技術數據


機型	MV01A	MV02A
最大真空度	-690 mm/Hg (-0.919 bar/-91.992 Kpa/-13.342 Psi) ± 5 %	
真空泵浦馬力	180W	
泵浦流量	50L/min	
噪音值	63~66dB	62~66dB
真空室尺寸 (長x寬x高)	300x300x300 mm	Ø160x160 mm
洩壓方式	程式設定洩壓	
機台尺寸 (寬x長x高)	61x55x56cm	48x40x40cm
重量	73Kg	34Kg
電源	交流110/220V單向雙線	
標準配件	高流速環氧樹脂組、真空泵浦	

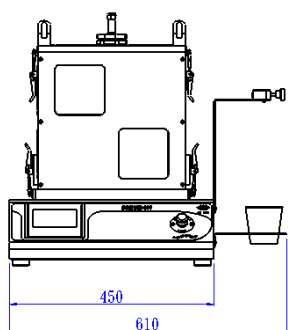

MV01A (單位:mm)

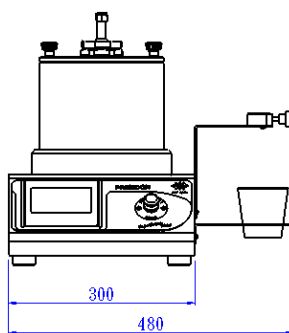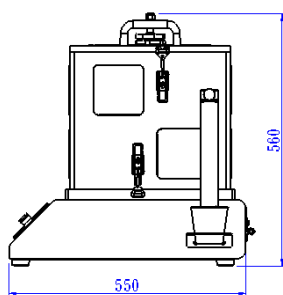

MV02A (單位:mm)

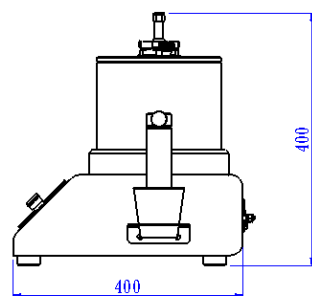

公司保留更改設計的權利，恕不另行通知。



TOP TECH

CE



中國區總代理：北京創誠致佳科技有限公司

聯系方式：400 0022 082

郵箱：info@hugetall.com

網站：www.hugetall.com

地址：北京市海澱區清河三街126號

我方保留規格變更權利, 若有變動恕不另行通知

NO.A17-11